

MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO MÉDICO Y SOCIAL



AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO

\$ 790*

***PRECIO UNITARIO AL POR MAYOR**

**CONTACTO:
+57 310 407 20 50 / +57 317 636 48 70**

FICHA TÉCNICA MASCARILLA DESECHABLE PARA USO MÉDICO Y SOCIAL



NOMBRE DEL PRODUCTO: Mascarilla desechable para uso médico y social.

MODELO: Tipo elástico.

DESCRIPCIÓN: Mascarilla desechable con banda elástica para ajuste en orejas, dip metálico para ajuste nasal.


DIMENSIONES: 17,5 cm X 9,5 cm.

CERTIFICADOS: INVIMA, FDA, CE
EN14683
ASTM F2100



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Compuesto por 3 capas, 2 de ellas en tela no tejida impermeable de 25 gr y una capa interna de filtración, elaborados con 3 pliegues para mejor cobertura facial.

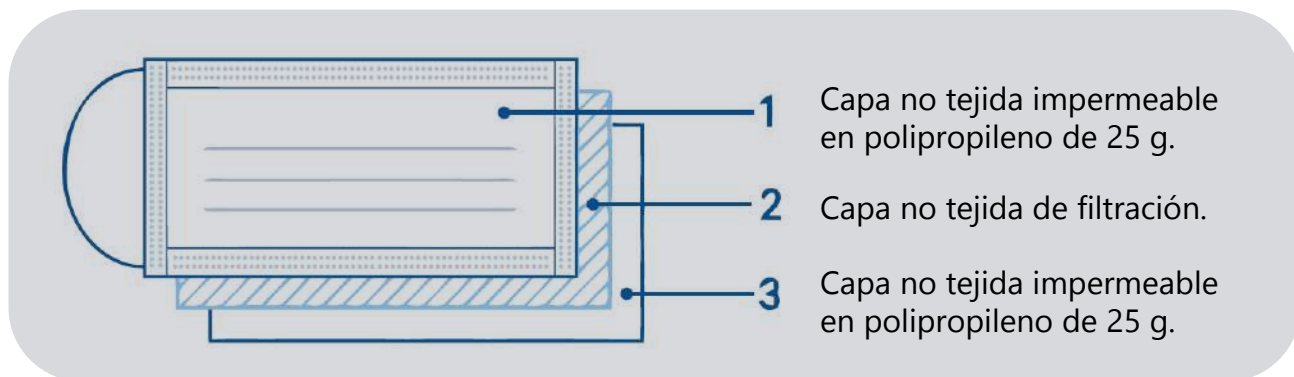

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO: Caja por 50 unidades.

CONDICIONES DE USO:

Este producto está indicado para uso médico, sector salud y hospitalario, NO se recomienda para usar en salas de cirugía. También puede ser empleado para uso personal como complemento al distanciamiento social.

OTRAS CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- Protección eficaz frente a la emisión de fluidos bucales y nasales.
- Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) Igual o mayor al 95%
- Cómodo y suave para uso prolongado (max. 8 horas).
- Termosellados.
- NO es Tóxico.
- Importado desde China



PRECAUCIONES, CONTRA-INDICACIONES Y ALERTAS DEL PRODUCTO:

- Leer cuidadosamente los detalles del producto en el empaque, y verificar la cantidad por unidad de empaque (50 PCS).
- Verificar especificación o referencia, fecha de producción del lote, vida útil y fecha de expiración.
- Este producto es desechable, destrúyalo después de su uso. No debe ser reutilizado.
- El manual de uso del tapabocas indica la manera adecuada de emplearlo para que realmente sea efectivo.

ALMACENAJE DEL PRODUCTO Y CONDICIONES DE USO:

- Almacenar adecuadamente en un lugar ventilado, con una humedad relativa que no exceda el 80%, temperatura máxima de 30° C y lejos de sustancias corrosivas. Evite la exposición a la luz directa en su almacenaje.
- Confirme que el empaque interno se encuentre intacto antes de su uso.
- Este producto tiene una vida útil de dos años, por favor utilícelo durante este periodo.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Lavar las manos antes y después de usar el tapabocas.
- La mascarilla debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta el mentón.
- Coloque las tiras elásticas en la parte posterior de las orejas.
- Ajustar la parte metálica superior a la forma de su nariz.
- El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible al rostro.

